

ATLAS™ VIBRATION ACU-NODE MASSAGER

INSTRUCTION BOOKLET AND SAFETY INFORMATION

SR-BALL

FIND MORE HELP ONLINE

Visit the URL to the right to find how-to photos, usage tips, and additional information about this product.



www.homedics.com/atlas

INSTRUCTIONS FOR USE

- **Prior to use:** Twist the massager halves in opposite directions to access the internal battery compartment (Fig. 2). Remove and dispose of the small plastic tab.
- Press the power button to activate the massager (Fig. 1). With plastic tab removed, massager will continue to run without holding down the power button.
- Hold the massager over the desired area to be massaged.
- After completing your massage, press the power button to turn the massager off.
- When the batteries need replacing, twist the massager halves in opposite directions to access the battery compartment (Fig. 2). Use a coin to open battery chamber and insert 2 “AAA” batteries as directed in the compartment. Close the battery door and reattach the top and bottom halves of the massager. Twist to close. Turn the halves only until snug — do not over-turn or use excess force.



FIG 1

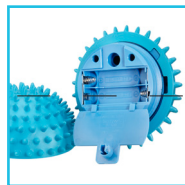


FIG 2

TO CLEAN

Clean only with a soft fabric cloth. Never allow water or other liquids to come into contact with this unit.

- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish, or paint thinner to clean.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING THIS APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- This product is not intended for medical use.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HoMedics, specifically any attachments not provided with the unit.
- Do not place or store appliance where it can fall or be dropped into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or any other liquid.
- Not for use by children.
- Turn off appliance when not in use.
- Never operate this appliance if it has been damaged or if it is not working properly. Return it to the HoMedics service center for examination and repair.
- Keep away from heated surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.
- Those with the following conditions should consult their doctor before using this product:
 - Pregnancy
 - Malignant tumor
 - Diabetes
 - Conditions requiring rest
 - Heart disease
 - Pacemakers
- If at any time soreness, rash, or pain occurs, discontinue use and consult your physician.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas, skin eruptions, or an open wound.
- A massage session longer than 20 minutes is not recommended.
- **Attention California Residents:**
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

BATTERY PRECAUTIONS

- Use only the size and type of batteries specified.
- When installing batteries, observe proper +/- polarities. Incorrect installation of batteries may cause damage to the unit.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- If the unit is not going to be used for a long period of time, remove batteries to prevent damage due to possible battery leakage.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove depleted batteries promptly.
- Dispose of properly in accordance with all state, province, and country regulations.

This product contains small parts that may present a choking hazard for young children.

Caution: All servicing of this massager must be performed by authorized HoMedics Service Personnel only.

90 DAY LIMITED WARRANTY

For detailed warranty instructions and information, visit: http://media.homedics.com/warranty/warranty_90days.pdf

For service in the USA

Email: cservice@homedics.com
Tel: 1.800.466.3342, M-F 8:30am-7:00pm EST

For service in Canada

Email: cservice@homedicsgroup.ca
Tel: 1.888.225.7378, M-F 8:30am-5:00pm EST

ENCUENTRE MÁS AYUDA EN LÍNEA

Visite la URL que está a la derecha para ver fotos del procedimiento, consejos de uso e información adicional acerca de este producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- **Antes de usar:** Gire las mitades del masajeador en dirección opuesta para acceder al compartimiento interno de las baterías (Fig. 2). Retire y deseché la pequeña lengüeta de plástico. Presione el botón de encendido para activar el masajeador (Fig. 1).

Una vez retirada la lengüeta de plástico, el masajeador seguirá funcionando sin necesidad de seguir presionando el botón de encendido. Sostenga el masajeador sobre el área que desea masajear. Luego de terminar el masaje, presione el botón de encendido para apagar el masajeador.

- Cuando necesite cambiar las baterías, gire las mitades del masajeador en dirección opuesta para acceder al compartimiento de las baterías (Fig. 2). Use una moneda para abrir la cámara de las baterías y coloque 2 baterías "AAA" como se indica en el compartimiento. Cierre la tapa de las baterías y vuelva a colocar las mitades superior e inferior del masajeador. Girelas hasta cerrar la unidad. Gire las mitades solamente hasta que hagan tope; no las fuerce en exceso ni las fuerce demasiado.

LIMPIEZA

Limpie únicamente con un paño suave. Nunca permita que esta unidad entre en contacto con agua u otros líquidos.

- No sumerja la unidad en ningún líquido para limpiar.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, querosén, limpiador de vidrios o lustramuebles ni diluyente de pintura para limpiar.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CUANDO SE UTILIZA ESTE ARTEFACTO, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS, COMO LAS SIGUIENTES: EA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Este producto no está diseñado para uso médico.

- Es necesario una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por niños o personas inválidas o con incapacidades o próximo a ellos. Utilice este artefacto solamente con el objetivo para el cual fue diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Homeedics, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la unidad.
- No coloque ni gire el artefacto en donde pueda caer o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- No está diseñado para ser usado por niños.
- Apague el artefacto cuando no lo esté usando.
- No haga funcionar nunca este artefacto si está dañado o no funciona correctamente. Envíelo al Centro de servicio Homeedics para que lo examinen y lo reparen.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO.

- Si usted tiene cualquier preocupación en referencia a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto.
- Los individuos con las siguientes condiciones deben consultar a su médico antes de usar este producto:
 - Embarazo
 - Diabetes
 - Enfermedad del corazón
 - Marcapasos
 - Condiciones que requieran reposo
 - Úlceras
 - Tumor maligno
- Si en algún momento tiene sarpujido o dolor, suspenda el uso y consulte a su médico.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, ni sobre erupciones cutáneas ni heridas abiertas.
- No se recomienda una sesión de masajes de más de 20 minutos de duración.
- Atención a los residentes de California: Este producto contiene sustancias químicas que el estado de California considera que causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

- Use únicamente el tamaño y tipo de baterías especificado.
- Cuando coloque las baterías, tenga en cuenta las polaridades adecuadas +/-.
- Si coloca las baterías de manera incorrecta, se puede dañar la unidad.
- No mezcle baterías usadas y baterías nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbon-zinc) ni recargables (níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, etc.).
- No arroje las baterías al fuego, pueden explotar o perder líquido.
- Si la unidad no se va a usar durante un período prolongado, retire las baterías para evitar daños debido a posibles pérdidas de las baterías.
- Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de colocar las baterías.
- Retire las baterías agotadas rápidamente.
- Deseche las de forma adecuada de acuerdo con todas las regulaciones estatales, provinciales y del país.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden constituir un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Precisión: Todo el servicio de este masajeador debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de Homeedics.

Para obtener información e instrucciones detalladas sobre la garantía, visite: http://media.homeedics.com/warranty/warranty_90days.pdf

Para obtener servicio en EE. UU.
Correo electrónico: cservice@homeedics.com
Teléfono: 1.800.466.3342, de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este)

www.homeedics.com/atlas

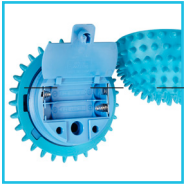


FIG 2



FIG 1