

HOMEDICS®

#1 BRAND IN MASSAGE*

ParaSpa™ Plus Paraffin Bath



Instruction Manual and Warranty Information

**Le manuel français débute
à la page 9**

PAR-350-CA/ PAR-350SDM-CA
Ver. C

2 year
limited warranty

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT place appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Store in a cool, dry place.
- ALWAYS unplug this appliance from the electrical outlet before cleaning and immediately after using
- DO NOT plug or unplug this product when hands are wet.
- DO NOT use while bathing

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- DO NOT use attachments not recommended by HoMedics, specifically any attachment not provided with the unit.
- DO NOT operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics' Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT drop or insert any object into any opening unless specifically directed in this manual.
- An appliance should NEVER be left unattended while plugged in.
- DO NOT carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- DO NOT use outdoors. This appliance is designed for household use only.
- DO NOT operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT apply the paraffin near eyes or other sensitive areas.
- DO NOT allow the level of paraffin wax to fall below the "MIN" line inside of the tub.
- NEVER use sharp instruments to remove solidified paraffin wax from the unit.
- Use appliance on a sturdy level surface only.
- ALWAYS store this product in a cool, dry place.
- DO NOT use an extension cord with this product

This unit is designed for household use only. This unit is not designed for commercial use.

Caution: All servicing of this product must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION—PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

SPECIAL WARNINGS:

IF YOU HAVE OR HAVE HAD ANY SKIN CONDITIONS, DISEASES AND OR HEALTH PROBLEMS, YOU SHOULD CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE USE.

- This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious paraffin bath.
- Not recommended for use by people with diabetes.
- Use bath only when seated. DO NOT stand on or in the tub unit.
- DO NOT apply paraffin wax on open cuts or wounds, warts, inflamed skin, or when the sensation of any extremities is decreased.
- Consult your physician if you have any questions or concerns about acute inflammation and peripheral vascular disease or decreased sensation of any extremity before using.
- Discontinue use and consult a physician if the paraffin wax feels too warm or if it does not feel warm enough. This may indicate a possible physical problem.
- Discontinue use and consult your physician if dermatitis, discomfort, irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments.
- Test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature is comfortable.
- DO NOT overfill the unit and always keep the paraffin wax level about 2 inches from the top of the bath.
- NEVER operate the unit without paraffin wax.
- DO NOT melt paraffin wax in its plastic packaging, nor melt it over an open flame, on a range, stove or in a microwave.
- DO NOT pour the melted paraffin wax from the tub/unit.
- Unplug unit before filling with paraffin wax.
- DO NOT use accessories or wax not recommended or sold by HoMedics.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by HoMedics' Service Center.
- DO NOT put water into the tub/unit.
- DO NOT add oil or any other additives to the paraffin wax.

Instructions for use:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.


This unit is controlled by a thermostat. The unit can hold a maximum of 3 lbs. of paraffin wax for operation. The melting time is less than 2 hours and it is designed to run continuously for 24 hours a day.

IMPORTANT NOTE:

This unit may feel very warm to sensitive skin. However, in order to fully experience the benefits of warm paraffin, the wax must be melted to a temperature between 123–131 degrees Fahrenheit. For proper application, quickly dip the body area (i.e. hand or elbow) into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds for wax to solidify. This should be repeated 6–10 times. Never soak in the wax for more than 1–2 seconds.

If you are very sensitive to heat or feel that this appliance may not be for you, please return this product to the place of purchase, **prior to use.**

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol  may also be marked on the appliance.

How to set up the ParaSpa Plus unit:

1. Remove all contents from packaging and check to make sure you have all of the following components of the ParaSpa Plus paraffin bath:
 - Paraffin bath tub with locking lid
 - Plastic grate
 - Three 1 lb. bags of Paraffin Wax
 - 20 plastic liners
2. Place unit on a level and sturdy table or surface and open the lid.
3. Make sure ParaSpa Plus tub is empty before putting wax into tub.
4. Open the bags of Paraffin Wax and place wax in the tub. Open only as many bags as you plan to use. The unit is designed to hold a maximum of 3 lbs. of paraffin wax and a minimum of 2 lbs (Fig. 1). Always keep the level of paraffin wax filled to the "MIN" level marked on the inside of the tub.
5. Plug the unit into a 120V A/C household outlet.
6. Close the locking lid. Push power button. "Heating" light will flash while wax is melting (Fig. 2). The paraffin wax should melt in less than 2 hours.
7. "Ready" light will come on when wax is completely melted. Open the lid and place the grate into the wax and allow it to sink to the bottom of the tub (Fig. 3). The ParaSpa Plus unit is designed to be used at room temperature. If the wax starts to solidify or flakes form on the top surface, close lid and press power button.

NOTE: The temperature of the room can have an effect on the unit's performance. Therefore we always recommend testing the paraffin temperature on the inside of the wrist area before dipping your entire hand or elbow.

NOTE: NEVER open lid or dip your hand, foot or elbow while the "heating" light is flashing.

NOTE: Place the grate into the unit only when the paraffin wax is melted.

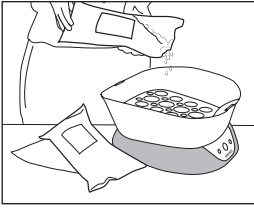


Fig. 1

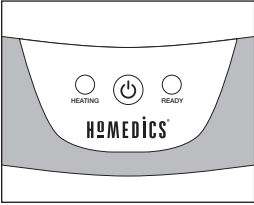


Fig. 2

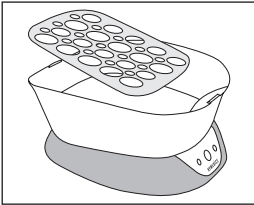


Fig. 3

NOTE:
To avoid burns,
be sure to
add the grate
before dipping.



Fig. 4

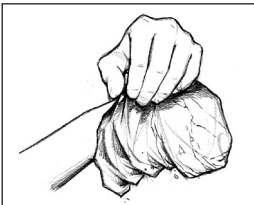


Fig. 5

How to use the paraffin bath:

1. Before immersing your hand or elbow test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature of the wax is comfortable. Remove all jewelry before dipping (i.e. rings, bracelets, watch).

NOTE: It is suggested you wash the area to be treated and apply lanolin-based hand lotion over the area before dipping it into the paraffin wax. This will allow the wax to be removed easier and will help moisturize the skin.

2. Dip your hand, elbow or foot into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds until the wax solidifies.

Try to avoid moving your hand or elbow while wax is applied.

NOTE: Dipping process is quick. Do not leave hand or elbow in the tub. Do not soak. Dip quickly in and out.

3. Repeat this step several times until several layers have formed; 6–10 coatings are suggested.

4. For extended warmth, place a plastic liner (provided) over the treated area and twist bag at opening. Keep paraffin wax and liner on treated area for 10–20 minutes for ultimate luxury (Fig. 4).

5. Peel off the wax from the treated area. If using a plastic liner, peel the plastic lining from the area being treated. Paraffin wax will peel off with liner (Fig. 5).

6. Discard used wax.

NOTE: If you are the only person using the ParaSpa Plus, the wax can be re-used. Simply put the wax back into the tub to re-melt.



Maintenance:

Periodically, the used portion of paraffin wax should be replaced and the unit should be cleaned.

1. Unplug unit and remove grate. Allow paraffin wax to solidify overnight.
2. Push on one end of paraffin wax block. This will tip it up. Lift the block out of the unit and dispose of it. **DO NOT USE SHARP OBJECTS TO REMOVE THE PARAFFIN WAX BLOCK, THIS MAY SCRATCH OR DAMAGE THE TUB.** If the paraffin wax does not remove easily, plug unit in and allow to heat for 10–15 minutes, then remove the paraffin wax block and unplug the unit.
3. Wipe the inside of the unit with a disposable towel to remove residual dirt and paraffin.
4. With a damp, soapy cloth, wipe clean. **DO NOT POUR WATER INTO THE UNIT, OR IMMERSE THE UNIT IN WATER.**
5. Store in a cool, dry place. When you are ready to re-use the ParaSpa Plus paraffin bath for the next heat treatment, repeat steps 2–7, "How to set up the ParaSpa Plus unit". Then, follow steps 1–6, "How to use the paraffin treatment."

ParaSpa™ Plus

Paraffin Bath

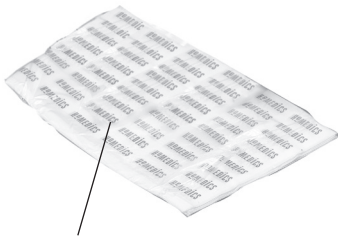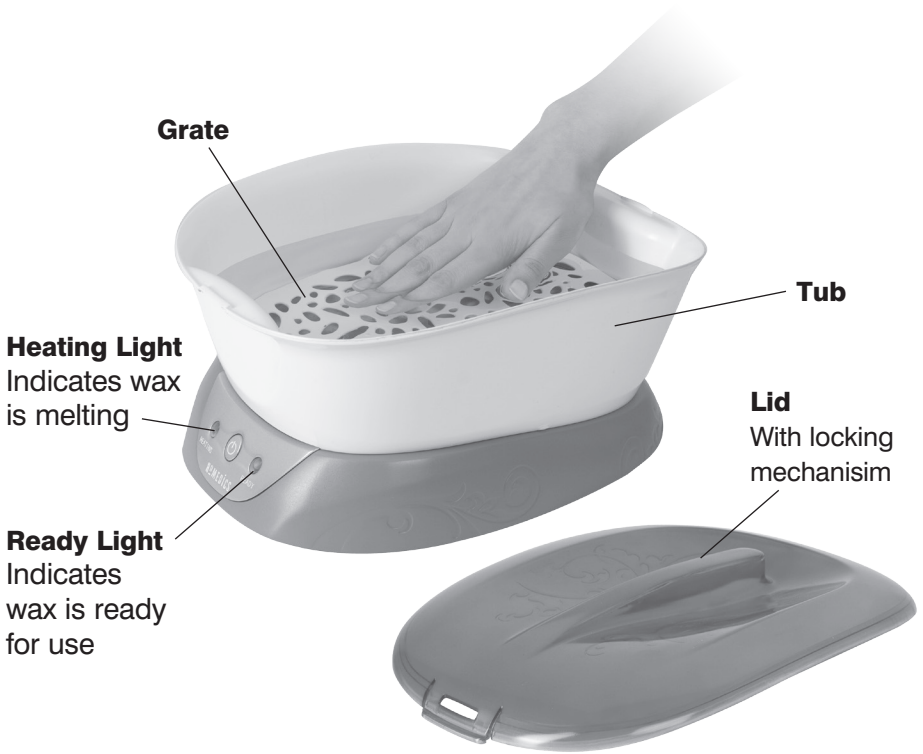

20 Plastic Liners

3-1lb. Bags of Paraffin Wax



Limited 2 Year Warranty

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers. To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Group Canada
ATTN : Consumer Relations,
6460 Kennedy Road. Unit C,
Mississauga, Ontario L5T 2X4 CANADA
No COD's will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in Canada, please visit: www.homedics.ca

Mail:

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario,
Canada L5T 2X4

Phone: (416) 785-1386

Fax : (416) 785-5862

Toll Free 1-888-225-7378

8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET

Monday – Friday

Email:

cservice@homedicsgroup.ca

www.homedics.ca

HOMEDICS®

NO 1 EN MASSAGE*

ParaSpa™ Plus

Bain de paraffine



**Manuel d'instruction et
information sur la garantie**

PAR-350-CA/ PAR-350SDM-CA

Ver. C

garantie limitée de **2** ans

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE, CERTAINES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

DANGER – AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

- NE TENTEZ PAS de prendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'INSTALLEZ OU NE RANGEZ PAS l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être tiré dans un bain ou un lavabo. Ne placez pas ou ne faites pas tomber l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- DÉBRANCHEZ TOUJOURS l'appareil de la prise de courant immédiatement après usage.
- NE PAS débrancher ou brancher l'appareil avec les mains mouillées.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil lorsque vous prenez votre bain.

AVERTISSEMENT – AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE BRÛLURE, D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Une étroite surveillance est requise lorsque cet appareil est utilisé par un enfant ou une personne handicapée, ou lorsque l'appareil est utilisé près d'un enfant ou d'une personne handicapée.
- Utilisez cet appareil uniquement pour les fonctions qui lui sont attribuées, conformément au présent manuel.
- N'UTILISEZ PAS d'accessoire non recommandé par HoMedics; en particulier tout accessoire non fourni avec l'appareil.
- NE FAITES JAMAIS fonctionner l'appareil si une prise ou un câble est endommagé, s'il ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé, a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service HoMedics afin qu'il soit évalué et réparé.
- Maintenez le câble loin des surfaces chaudes.
- N'INSÉREZ PAS et NE LAISSEZ PAS tomber d'objet dans une quelconque ouverture de l'appareil, sauf si les présentes instructions vous demandent de le faire.
- Ne laissez JAMAIS un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'UTILISEZ PAS le câble d'alimentation pour transporter l'appareil.
Ne vous servez pas du câble en guise de poignée.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER l'appareil dans un endroit où des produits en aérosol ou de l'oxygène ont été utilisés.
- N'APPLIQUEZ PAS de paraffine près des yeux ou autres zones sensibles.
- Assurez-vous que le niveau de paraffine contenu dans l'appareil NE SOIT JAMAIS inférieur à la ligne « MIN » tracée dans le bassin.
- N'UTILISEZ JAMAIS d'instruments pointus pour enlever la paraffine.
- Utilisez cet appareil uniquement sur une surface ferme et au niveau.
- RANGEZ TOUJOURS l'appareil à un endroit frais et sec.
- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.

Attention : Toute réparation de cet appareil doit être effectuée uniquement par le personnel de service autorisé HoMedics.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS PARTICULIERS :

SI VOUS AVEZ DÉJÀ EU OU SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES CUTANÉS OU DE SANTÉ, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation médicale. Cet appareil est conçu uniquement pour offrir un bain de paraffine de luxe.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes diabétiques.
- Soyez toujours assis(e) lorsque vous utilisez le bain de paraffine. NE VOUS TENEZ PAS debout sur l'appareil ou dans le bassin.
- N'APPLIQUEZ PAS de paraffine sur une plaie ouverte, une verrue, une peau irritée, ou lorsque la sensibilité d'une extrémité du corps est diminuée.
- Si vous avez des questions ou des inquiétudes à propos d'inflammation aiguë, d'acrosyndrome ou la diminution de la sensibilité d'une extrémité du corps, consultez votre médecin.
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si la paraffine vous semble trop chaude ou pas suffisamment chaude. Ceci peut être un signe d'un problème de santé.
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si l'utilisation répétée du bain de paraffine provoque de la dermatite, de l'inconfort, de l'irritation ou de la douleur.
- Testez la paraffine dans le creux de votre poignet afin de vous assurer que la température est convenable.
- NE REMPLISSEZ PAS trop l'appareil; conservez toujours le niveau de paraffine à environ 2 po (5 cm) du rebord du bassin.
- N'ACTIVEZ JAMAIS l'appareil s'il n'y a pas de paraffine.
- NE FAITES PAS fondre la paraffine dans son emballage plastique, ni à l'aide d'une flamme nue, un fourneau, un poêle ou un micro-ondes.
- NE COULEZ PAS la paraffine fondue à partir du bassin/de l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir de paraffine.
- N'UTILISEZ PAS d'accessoire ou de cire/paraffine non recommandés ou qui ne sont pas vendus par HoMedics.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le centre de service HoMedics.
- NE VERSER PAS d'eau dans le bassin/l'appareil.
- N'AJOUTEZ PAS d'huile ou autre produit dans la paraffine.

Instructions d'utilisation :

Cet appareil est muni d'un connecteur polarisé (dont une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, le connecteur est conçu pour se brancher à une prise de courant polarisée d'une seule façon. Si le connecteur n'entre pas complètement dans la prise, inversez le connecteur et réessayez. Si vous ne parvenez toujours pas à brancher l'appareil, contactez un électricien qualifié.

Cet appareil est contrôlé par un thermostat. L'appareil peut contenir un maximum de 3 lb de paraffine. L'appareil prend moins de 2 heures à fondre la paraffine et il est conçu pour fonctionner sans arrêt 24 heures par jour.

NOTE IMPORTANTE :

L'appareil peut être très chaud au touché pour les personnes avec la peau sensible. Cependant, pour profiter pleinement des avantages de la paraffine chaude, celle-ci doit être fondue à une température variant de 123 à 131 degrés Fahrenheit (entre 50 et 55 Celsius). Pour une application adéquate, trempez et ensuite retirez rapidement la partie du corps (p. ex. main, coude) dans la paraffine fondue. Attendez quelques secondes, le temps que la paraffine se solidifie. Répétez ce traitement 6 à 10 fois. Ne laissez jamais la peau dans la paraffine pendant plus de 1 ou 2 secondes.

Si vous êtes particulièrement sensible à la chaleur ou si vous croyez que cet appareil ne vous convient pas, veuillez le retourner au détaillant **avant d'utiliser l'appareil**.

RÉPARATION D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION :

Un appareil à double isolation est muni de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est fourni avec un appareil à double isolation, et aucun dispositif de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. La réparation d'un appareil à double isolation nécessite un soin extrême et une bonne connaissance du système. Une telle réparation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces originales. Un appareil à double isolation est identifié par les mots : « DOUBLE INSULATION » ou « DOUBLE INSULATED ». Le symbole "☐" peut également se trouver sur l'appareil.

Configuration de l'appareil ParaSpa Plus :

1. Retirez tous les éléments de l'emballage, et vérifiez qu'aucune composante du bain de paraffine ParaSpa Plus ne manque :
 - Bassin de paraffine avec couvercle verrouillable
 - Grille en plastique
 - Trois sacs de paraffine de 1 lb
 - 20 feuilles de revêtement plastique
2. Placez l'appareil sur une table ou une surface stable et levez le couvercle.
3. Assurez-vous que le bassin du ParaSpa Plus est vide avant d'y insérer la paraffine.
4. Ouvrez les sacs de paraffine et placez la paraffine dans le bassin. Ouvrez uniquement le nombre de sacs que vous prévoyez utiliser. L'appareil est conçu pour contenir un maximum de 3 lb (1,3 kg) et un minimum de 2 lb (1,8 kg) de paraffine (Fig. 1). Gardez toujours la quantité de paraffine à un niveau supérieur à la ligne « MIN » tracée à l'intérieur du bassin.
5. Branchez l'appareil à une prise de courant de 120 V c.a. domestique.
6. Remettez le couvercle verrouillable. Appuyez sur le bouton de mise en marche « Power ». Le voyant « Heating » clignotera, indiquant que l'appareil chauffe la paraffine (Fig.2). La paraffine prend normalement moins de 2 heures à fondre.
7. Lorsque la paraffine est complètement fondue, le voyant « Ready » s'allumera. Ouvrez le couvercle, placez la grille dans la paraffine et attendez que celle-ci se dépose au fond du bassin (Fig.3). L'appareil ParaSpa Plus est conçu pour être utilisé dans un espace à température ambiante. Si la paraffine se solidifie ou des flocons se forment à la surface, remettez le couvercle et appuyez sur le bouton « Power ».

REMARQUE : La température de la pièce peut affecter la performance de l'appareil. Par conséquent, nous recommandons de toujours vérifier la température de la paraffine au creux de votre poignet avant de submerger votre main ou coude. REMARQUE : NE JAMAIS lever le couvercle ou tremper votre main, votre pied ou votre coude lorsque le voyant « Heating » clignote. REMARQUE : Placez la grille dans l'appareil uniquement lorsque la paraffine est fondue.

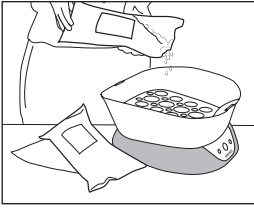


Fig. 1

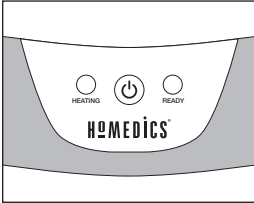


Fig. 2

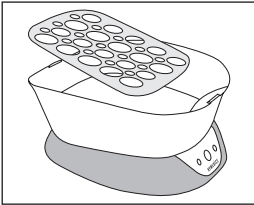


Fig. 3

REMARQUE :
Pour éviter toute brûlure, assurez-vous d'installer le grillage avant de tremper votre main, coude ou pied.



Fig. 4

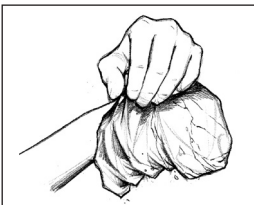


Fig. 5

Utilisation du bain de paraffine :

1. Avant d'immerger la main, le coude ou le pied dans la paraffine, vérifiez la température de la paraffine dans le creux de votre poignet pour vous assurer que la température est adéquate. Enlevez tout bijou avant utilisation (p. ex., bagues, bracelets, montre).
REMARQUE : Nous recommandons de laver la peau qui sera traitée, ainsi que d'appliquer une lotion pour les mains à base de lanoline avant de submerger la peau dans la paraffine. Ceci permet d'enlever facilement la paraffine et aide à hydrater la peau.
2. Submergez votre main, coude ou pied dans la paraffine fondue et retirez la main, le coude ou le pied immédiatement. Attendez quelques secondes, le temps que la paraffine se solidifie. Évitez de bouger votre main, coude ou pied durant l'application de la paraffine.
REMARQUE : La submersion doit être rapide. Ne laissez pas la main, le coude ou le pied dans le bassin. Ne submergez pas la main, le coude ou le pied longtemps. Trempez et retirez rapidement.
3. Répétez cette opération plusieurs fois, jusqu'à ce que plusieurs couches de paraffine soient formées (suggestion : environ 6 à 10 couches).
4. Pour une sensation de chaleur prolongée, recouvrez la peau traitée avec un revêtement de plastique (inclus) et tournez le sac à l'ouverture. Conservez la paraffine et le revêtement sur la peau traitée pendant 10 à 20 minutes pour un traitement de luxe (Fig.4).
5. Enlevez la paraffine qui se trouve sur la peau. Si vous avez utilisé un revêtement en plastique, enlevez-le. La paraffine s'enlèvera avec le revêtement (Fig.5).
6. Jetez la paraffine utilisée. **REMARQUE :** Si vous êtes la seule personne à utiliser l'appareil ParaSpa Plus, vous pouvez réutiliser la paraffine. Redéposez la paraffine dans le bassin afin qu'elle soit fondue de nouveau.



Entretien :

Périodiquement, la paraffine utilisée doit être remplacée et l'appareil doit être nettoyé.

1. Débranchez l'appareil et retirez la grille. Laissez la paraffine se solidifier pendant la nuit.
2. Le lendemain, poussez sur un des côtés du bloc de paraffine. Ceci le dégagera.
Retirez le bloc de paraffine et jetez-le. **N'UTILISEZ PAS D'OBJETS POINTUS OU COUPANTS POUR ENLEVER LE BLOC DE PARAFFINE, AU RISQUE D'ÉGRATIGNER OU D'ENDOMMAGER LE BASSIN.** Si la paraffine ne s'enlève pas facilement, branchez l'appareil et faites chauffer la paraffine pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, débranchez l'appareil et enlevez le bloc de paraffine.
3. Essuyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'une serviette jetable afin d'enlever la saleté résiduelle et l'excédant de paraffine.
4. Nettoyez ensuite l'appareil à l'aide d'un linge humide et savonneux.
NE VERSEZ PAS D'EAU DANS L'APPAREIL, ET NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU.
5. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Pour réutiliser le bain de paraffine chaude ParaSpa Plus, répétez les étapes 2 à 7 de la section « Configuration de l'appareil ParaSpa Plus ». Ensuite, suivez les étapes 1 à 6 de la section « Utilisation du bain de paraffine ».

ParaSpa™ Plus

Bain de paraffine

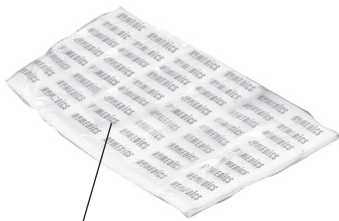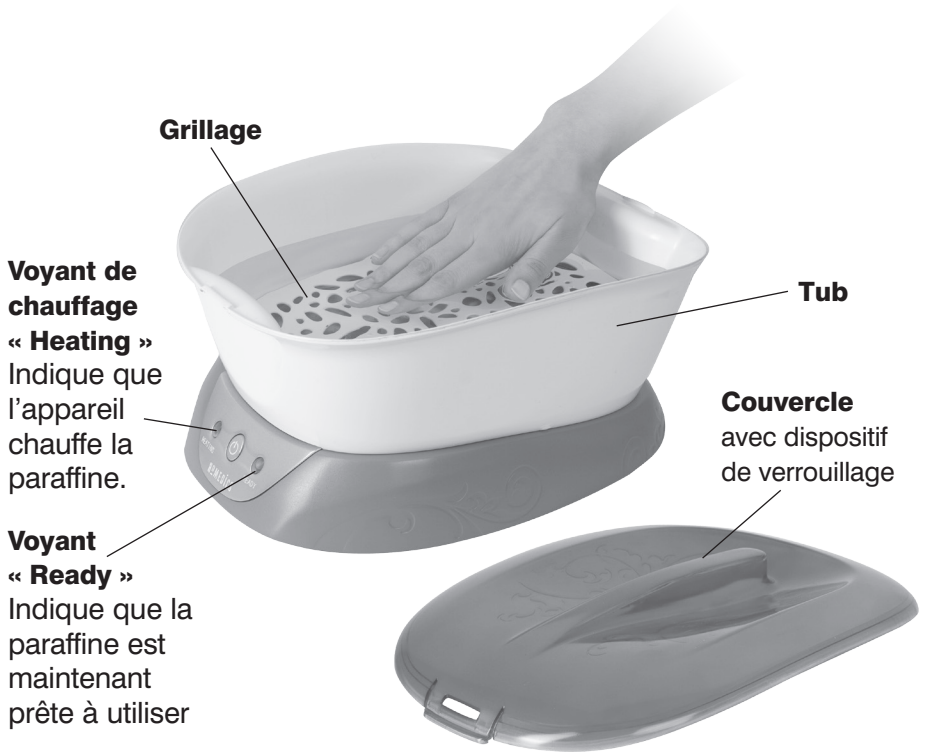

20 feuilles de revêtement plastique

3 sacs de paraffine de 1 lb



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

HoMedics vend ses produits et s'engage à les garantir de tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat originale, sauf exceptions mentionnées ci-dessous. HoMedics garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre si le produit a été utilisé de manière normale. Cette garantie s'adresse uniquement aux consommateurs et n'est pas valide pour les détaillants.

Pour obtenir un service couvert par la garantie, postez le produit et votre reçu d'achat (en tant que preuve d'achat), franco de port, à l'adresse suivante :

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C. Mississauga, Ontario L5T 2X4 CANADA

Aucun C.R. ne sera accepté.

HoMedics n'autorise personne, y compris, sans s'y limiter, les détaillants, les acheteurs ultérieurs du produit à partir d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à contraindre HoMedics d'une quelconque façon au-delà des modalités décrites dans la présente. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive; un accident; l'ajout de tout accessoire non autorisé; l'altération du produit; une installation inadéquate; une modification ou une réparation non autorisée; le mauvais usage de l'alimentation électrique; la perte de courant; un produit échappé; un mauvais fonctionnement ou un dommage d'une partie ou de la totalité de l'appareil en raison du non-respect des recommandations d'entretien fournies par le fabricant; des dommages causés lors du transport; le vol; la négligence; le vandalisme; les conditions environnementales; la perte de l'utilisation lorsque l'appareil est en réparation ou en attente d'une pièce ou d'une réparation; ou toute autre condition possible qui est hors du contrôle de HoMedics. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été acheté et utilisé au pays dans lequel le produit a été acheté. La garantie ne couvre ni un produit nécessitant des modifications ou une adaptation afin qu'il puisse fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel le produit a été conçu, fabriqué, approuvé ou autorisé, ni la réparation d'un produit endommagé par ces modifications.

LA GARANTIE OFFERTE DANS LA PRÉSENTE CONSTITUE UNE GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE DE LA QUALITÉ MARCHANDE DE L'ADAPTATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE L'ENTREPRISE AU SUJET DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HoMEDICS N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUT INCIDENT, TOUTE CONSÉQUENCE OU TOUT DOMMAGE SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE COUVRE D'AVANTAGE QUE LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION D'UNE OU PLUSIEURS PIÈCES CONSIDÉRÉES DÉFECTUEUSES DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA OFFERT. SI LES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HoMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LEU DE LE RÉPARER OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne couvre pas l'achat d'un produit ouvert, utilisé, réparé, ou réemballé, y compris, sans s'y limiter, la vente d'un tel produit sur des sites Internet de ventes ou la vente d'un tel produit par des revendeurs en bloc ou de surplus. Toute garantie devient immédiatement invalide et est annulée lorsqu'un produit ou une pièce est réparé, remplacé, altéré ou modifié sans l'autorisation expresse et écrite de HoMedics.

Cette garantie vous procure des droits spécifiques. Il est possible que vous ayez des droits supplémentaires, lesquels peuvent changer d'un pays à l'autre. En raison des réglementations propres à chaque pays, il se peut que certaines des limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à vous.

Pour plus d'information au sujet de nos produits au Canada, veuillez visiter le www.homedics.ca

par la poste :

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario,
Canada L5T 2X4

téléphone : 416-785-1386
télé : (416) 785-5862
sans frais 1-888-225-7378

8 h 30 à 17 h 00 HNE
Du lundi au vendredi

Courriel:
cservice@homedicsgroup.ca
www.homedics.ca